


PŘEDSTAVUJEME BS-AKTIV^{INT}




Progresivní čočky BS-AKTIV^{INT} splňují všechna očekávání nositelů progresivní korekce.

- široké zorné pole a ostré vidění na všechny vzdálenosti
- vynikající snášlivost při všech denních činnostech
- bezproblémové a rychlé přivykání při střídání brýlí
- komfort vidění při rychlých změnách směru pohledu
- neomezená možnost volby moderní brýlové obruby
- široká nabídka moderních materiálů

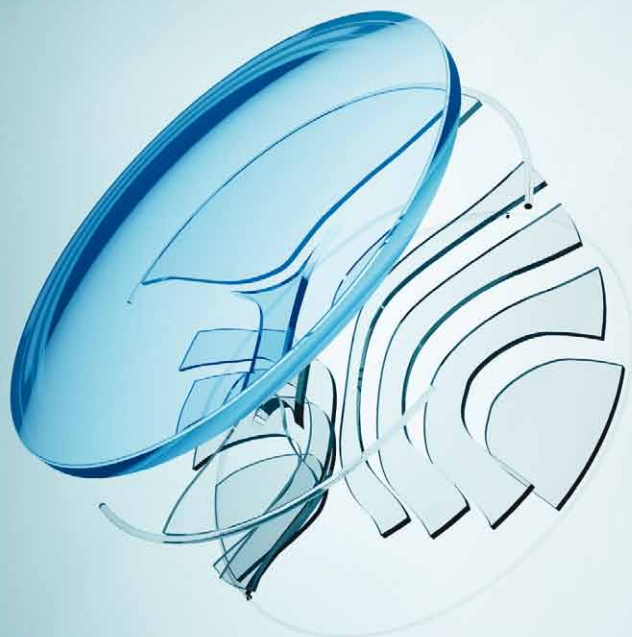



PŘEDSTAVUJEME „BACK SIDE“ KONCEPT

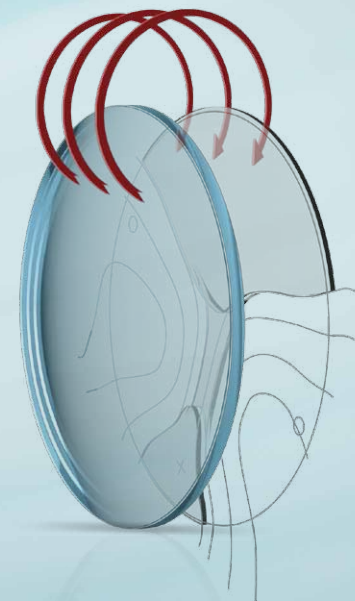

BS-AKTIV^{INT} – zvyšuje výkon osvědčených progresivních čoček MV-AKTIV^{INT}. Použití revoluční freeform technologie umožnilo přesunutí úspěšného a ještě zdokonaleného progresivního designu MV-AKTIV^{INT} na zadní plochu čočky. Tím bylo dosaženo zásadního zvětšení zorného pole, eliminace periferního zkreslení a snadnějšího přivykání.

DŘÍVE

Progresivní design na přední straně čočky vytvořený odlitím do formy.

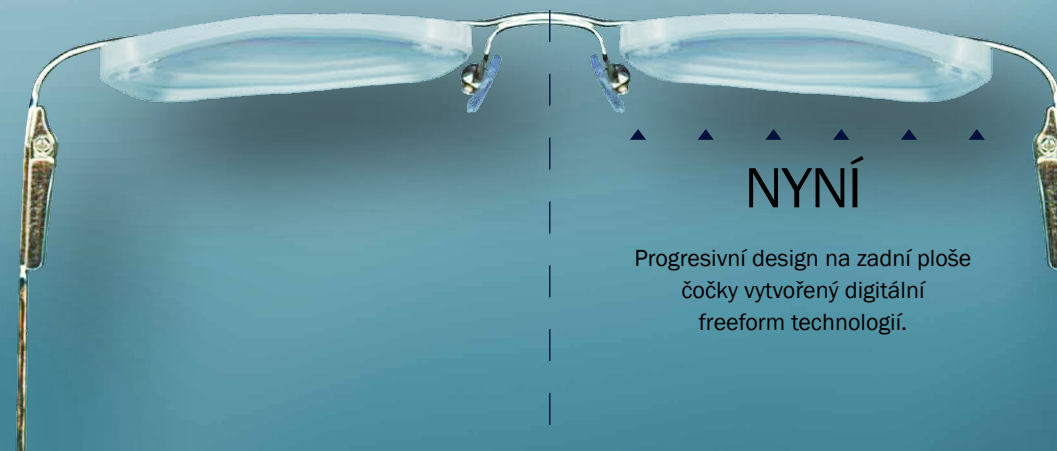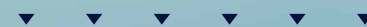


NYNÍ

Progresivní design na zadní ploše čočky vytvořený digitální freeform technologií.

BACK
SIDE **AKTIV^{INT}**

BACK
SIDE **AKTIV^{INT}**

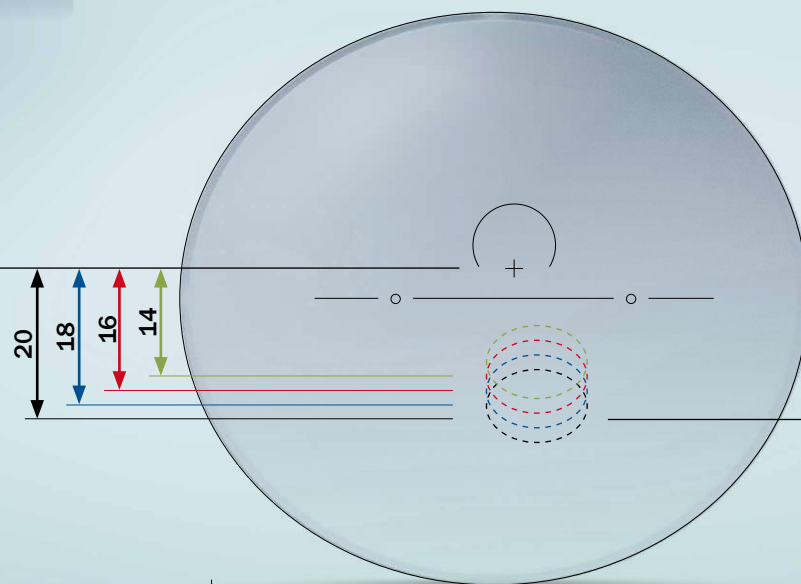

UNIVERZÁLNÍ VE VOLBĚ OBRUBY

Freeform technologie umožňuje absolutní volnost při volbě výšky centrace. Ať už si zákazník vybere jakoukoliv obrubu, stačí zvolit adekvátní variantu progresivní výšky – 14, 16, 18 nebo 20 mm.

UNIVERZÁLNÍ VE VOLBĚ MATERIÁLU

Freeform technologie umožňuje absolutní volnost při volbě materiálu čočky. S ohledem na estetické a funkční požadavky zákazníka je možné zvolit nejvhodnější variantu ze široké nabídky materiálů.



BS-AKTIV ^{INT} 1,5	-8,0	+6,0
BS-AKTIV ^{INT} 1,5 TRANSITIONS	-8,0	+5,0
BS-AKTIV ^{INT} 1,6	-9,0	+7,0
BS-AKTIV ^{INT} 1,6 TRANSITIONS	-9,0	+6,0
BS-AKTIV ^{INT} 1,67	-9,0	+7,0
BS-AKTIV ^{INT} 1,67 TRANSITIONS	-9,0	+6,0
BS-AKTIV ^{INT} 1,74	-11,5	+5,0
BS-AKTIV ^{INT} 1,53 TRILOGY	-8,5	+5,5
BS-AKTIV ^{INT} 1,5 NUPOLAR	-7,0	+5,5
BS-AKTIV ^{INT} 1,5 DRIVEWEAR	-7,0	+5,5

BACK
SIDE **AKTIV^{INT}**

BACK
SIDE **AKTIV^{INT}**

NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ PROVEDENÍ

Nabízíme možnost individuálního zhotovení čoček BS-AKTIV^{INT}. Díky unikátní digitální technologii kalkulace designu zohledníme fyziologické a anatomické aspekty uživatele a navrhujeme unikátní design pro maximální komfort vidění.

Pokud se rozhodnete využít možnosti individualizace designu, uveďte na speciálním formuláři všechny potřebné údaje. Kromě dioptrických hodnot, adice a výšky centrace ještě další specifické parametry:

- Pupilární distance monokulárně
- Šířka, výška očníce a šířka nosníku
- Úhel prohnutí obruby
- Inklinací úhel
- Vrcholová vzdálenost čočky od oka

Pokud neuvedete specifické parametry, budou čočky zhotoveny podle standardního zadání.



**BACK
SIDE** **AKTIV^{INT}**

**2IDE
BACK** **AKTIV^{INT}**

